

Liebe Patientin, lieber Patient,

der AquaSplint **thermo** ist eine innovative und komfortable Aufbisschiene. Sie leistet effektive Hilfe bei der Diagnose und Therapie von CMD und den damit assoziierten Erkrankungen wie Kiefergelenkdysfunktion, Nacken- und Kopfschmerzen, Blockaden, moderate Schlafapnoe und Tinnitus.



Die Aqua-Balance zwischen seinen beiden Wasserkissen entspannt die Muskulatur, harmonisiert die Bisslage und kann somit zur einer schnellen Schmerzlinderung beitragen.

Wir empfehlen die Anwendung durch Fachpersonal!


Tragedauer: 8 Std. in der Nacht und 2 Std. am Tag, für ca. 4 Wochen, starkes Knirschen und scharfe Kanten an Prothesen/Zahnkronen können die Lebensdauer verkürzen. Das Austreten der Wasser-Glycerin-Füllung ist gesundheitlich unbedenklich.

Bitte tragen Sie den AquaSplint **thermo** mindestens 2 Stunden unmittelbar vor jedem zahnärztlichen Kontrolltermin.

Vor und nach dem Tragen sollten Sie den AquaSplint **thermo** mit einer weichen Zahnbürste/ Zahnpasta reinigen. Die Schiene sollte zudem auch nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.

Wir wünschen Ihnen gute Besserung!

AquaSplint **thermo**
ist ein Qualitätsprodukt
Made in Germany

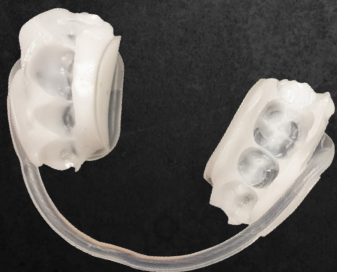

Ihr Praxisteam